

GL 45 *универсална капачка*



Приложения



С бутилка за отпадъчна течност

За събиране на отпадъчни среди чрез използване с бутилка GL 45 във връзка със смукателна помпа и аксесоари.




С бутилка за улавяне на влага

Например за абсорбиране на влага с десикант променящ цвета си при насищане.




С бутилка за абсорбция на пари (неутрализиране)

За абсорбиране на киселинни или алкални пари, за да се предотврати разпространението на вредни пари в околната среда или към помпата.

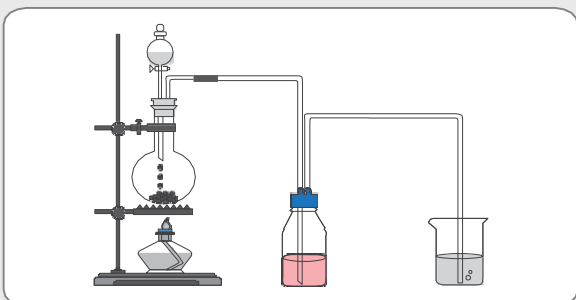

С трансферна бутилка

За прехвърляне на стерилна среда, съхранявана в бутилка GL 45, в друг контейнер или реактор с перисталтична помпа в затворена система.

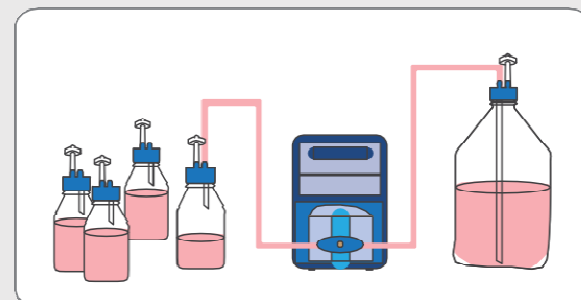

С предпазна бутилка

За предотвратяване на засмукване на течност в помпата.



Универсална смукателна капачка за бутилки с резба GL 45. Две връзки за маркуч ID 6. Изработена от полипропилен (PP), автоклавируема до 130°C.

Каталожен номер: 197000-60

Цена: 30,00 лв. без ДДС/ брой;
Включена доставка в цялата страна.

За контакт: office@biotechlab-bg.com
Телефон: +359(2)8704928